

DENSIM

DENTAL INSTRUMENTS



A black and white photograph of a dental handpiece. The handpiece is positioned in the lower-left corner, angled towards the center. It is emitting a powerful, wide spray of fine particles, likely water or air, which fills the right half of the frame. The particles are captured in motion, creating a dense, textured cloud. The background is solid black, which makes the bright spray and the metallic handpiece stand out. The overall composition is dynamic and emphasizes the precision and power of the dental instrument.

Сила и Точность

DENSIM DENTAL INSTRUMENTS

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Сила и точность стоматологических инструментов DENSIM позволяют достичь совершенных результатов в вашей работе.

Кнопочная система

Комфортная и безопасная кнопочная система фиксации и извлечения ротационных инструментов.

Керамические подшипники

Фирменные керамические подшипники DENSIM гарантируют длительный срок службы ротора, снижают уровень шума и вибрации.

Освещение

Монолитный световод обеспечивает идеальное и равномерное освещение всего рабочего поля.

Зажимной механизм

Длительный срок службы зажимного механизма ротационных инструментов обеспечивается благодаря цанге из прочного материала - карбида вольфрама.

Гигиена

Поверхность всех наконечников дезинфицируется химическими дезинфекционными средствами (дезинфекция с помощью аэрозоля или дезинфицирующих салфеток).

MONTREAL



MONTREAL S LUX

Турбины модели MONTREAL S LUX имеют маленькую головку, позволяющую проводить деликатную обработку в труднодоступных местах. Усовершенствованные турбины MONTREAL обладают очень длительным сроком службы и высокой эксплуатационной надежностью при очень тихом ходе.



DENSIM QUICK T LED

Быстросъемное соединение DENSIM QUICK LED отличается высокой надежностью и простотой использования. Он моментально устанавливается и снимается с помощью простого в использовании быстросъемного и безопасного разъема.

Номер позиции: DSQC6116K

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Макс. количество оборотов (при 2,8 бар)
Давление приводного воздуха
Подшипники
Освещение
Мощность
Тип головки
Покрытие
Система охлаждения
Номер позиции (с коннектором)
Номер позиции (без коннектора)

MONTREAL LUX	MONTREAL S LUX
350.000 об/мин.	420.000 об/мин.
2,1 - 2,8 бар	2,1 - 2,8 бар
керамические	керамические
LED	LED
22 Ватт	18 Ватт
стандартный	мини
титан	титан
4-х канальная	3-х канальная
DSHP21KLSET	DSHP22KLSET
DSHP21KL	DSHP22KL

Эта новая эксклюзивная серия турбин, благодаря революционному покрытию из титана, легко удерживается в руках и имеет высокую стойкость к износу. Турбины MONTREAL включают в себя все возможные на сегодняшний день преимущества : идеально держатся в руке, имеют четырех канальное распыление воды, они мощные и тихие с уровнем шума до 55 dB, простые в уходе и имеющие длительный срок службы.

MONACO



MONACO S LUX

Модификация с небольшой головкой подходит для работы в труднодоступных местах в области моляров и для детских врачей.



DENSIM QUICK LED

Составной частью турбин MONACO является коннектор DENSIM QUICK LED, который оснащен антиретракционным клапаном. Он легко подключается к кабелю через соединение Midwest с помощью входящего в комплект ключа.

Номер позиции: DSQC6016K

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Макс. количество оборотов (при 2,8 бар)
Давление приводного воздуха
Подшипники
Освещение
Мощность
Тип головки
Система охлаждения
Номер позиции (с коннектором)
Номер позиции (без коннектора)

MONACO LUX

320.000 об/мин.
2,1 - 2,8 бар
керамические
LED
19 Ватт
стандартный
4-х канальная
DSHE21KL SET
DSHE21KL


MONACO S LUX

400.000 об/мин.
2,1 - 2,8 бар
керамические
LED
17 Ватт
мини
3-х канальная
DSHE22KL SET
DSHE22KL

Турбины MONACO LUX оснащены подсветкой LED, которая находится в легко подключаемом коннекторе. Цветовая температура LED соответствует дневному свету. Срок службы DENSIM LED в несколько раз больше чем у традиционных галогенных лампочек. Монолитный стеклянный световод обеспечивает естественное освещение рабочего пространства. В предложении имеются модели MONACO LUX со стандартной головкой и MONACO S LUX с небольшой головкой. Изделия DENSIM можно стерилизовать в автоклаве при температуре до 135°C.

ТУРБИНЫ

VIENNA

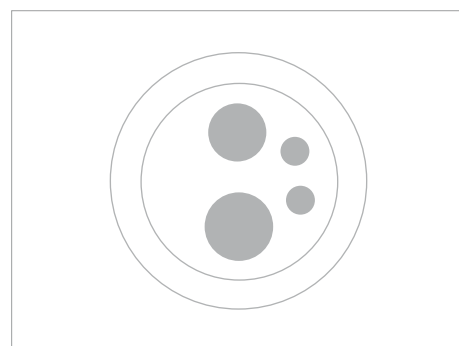

Эффективность работы

Система четырехточечного охлаждения, низкий уровень вибраций и минимальный уровень шума помогают повысить комфорт и эффективность работы стоматолога.

4-канальное подключение

Турбины DENSIM можно подключить с помощью стандартного 4-канального соединения типа Midwest.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Макс. обороты (при 2,8 бар)

Рекомендованное давление воздуха

Подшипники

Освещение

Мощность

Тип головки

Номер позиции

VIENNA

320.000 об/мин.

2,1 - 2,8 бар

керамические

без подсветки


19 Ватт

стандартный

DSHE17

Эргономическая форма инструментов и простой но эффективный дизайн удовлетворяют требованиям каждого стоматолога. Линейка турбин VIENNA обеспечивает оптимальные параметры по приемлемой цене. Благодаря зажимному механизму с цангой из прочного металла обеспечивается длительный срок службы изделия. Практичная кнопочная система позволяет быстро и безопасно осуществлять замену ротационного инструмента. Качество инструментов дополняет хромирование поверхности. При использовании керамических подшипников достигается низкий уровень шума турбины.

PARIS U 1:1 LUX

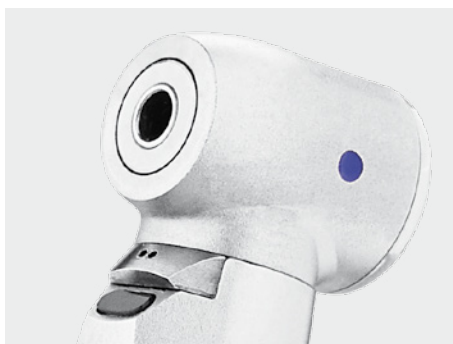

PARIS U 1:1 LUX

Угловой наконечник PARIS U 1:1 LUX дает стоматологу несравнимую свободу действий. Он расширяет обзор операционного поля и облегчает доступ к труднодоступным зонам. Этот наконечник имеет высокий уровень безопасности, прост в уходе и гарантирует безупречную гигиену.



PARIS HEAD

Благодаря системе безопасного фиксационного зажима DENSIM, головки заменяются просто и быстро. Маленький размер головок обеспечивает оптимальный обзор области препарирования.

Номер позиции: DSLPH11

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Макс. количество оборотов
Передаточное соотношение
Тип
Совместимость
Тип охлаждения
Ротационный инструмент
Покрытие
Номер позиции

PARIS U 1:1 LUX

40.000 об/мин.
1:1
угловой наконечник с подсветкой
ISO 3964
внутреннее
тип RA ø 2,35 мм
титан
DSLPH11LSET

DENSIM обновляет свои лучшие инструменты, нанося на них новое специальное покрытие. Эта высокотехнологическая обработка на базе титана придает ручным инструментам новое качество.

DUBLIN U 1:1



DUBLIN U 1:1

Угловой наконечник со съемной головкой, без подсветки, с передаточным соотношением 1:1.



DUBLIN U 1:1 LUX

Угловой наконечник со съемной головкой, с подсветкой, с передаточным соотношением 1:1. Стекланный световод обеспечивает постоянное качество и интенсивность света.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Макс. количество оборотов
Передаточное соотношение
Тип
Совместимость
Тип охлаждения
Ротационный инструмент
Номер позиции

DUBLIN U 1:1
40.000 об/мин.
1:1
угловой наконечник без подсветки
ISO 3964
внутреннее
тип RA ø 2,35 мм
DSLS2031SET

DUBLIN U 1:1 Lux
40.000 об/мин.
1:1
угловой наконечник с подсветкой
ISO 3964
внутреннее
тип RA ø 2,35 мм
DSLS2031LSET

Продуманный дизайн, простота использования и надежность – это свойства, характерные для наконечников DENSIM. Удобная форма инструментов и используемые производственные технологии позволяют достигать необходимой точности при работе стоматолога. Наконечники DENSIM полностью совместимы с микродвигателями, которые удовлетворяют норме ISO 3964. Преимуществом угловых наконечников DUBLIN U является съемная головка. Наконечники типа DUBLIN имеют поверхностную обработку в виде матового хрома. В предложении имеются модификации углового наконечника DUBLIN с подсветкой и без подсветки.

DUBLIN P 1:1



DUBLIN P 1:1

Прямой наконечник без подсветки,
с поворотной зажимной системой,
с передаточным соотношением 1:1.



DUBLIN HEAD

Съемная головка DUBLIN HEAD
с кнопочным зажимом ротационного
инструмента. Головку можно
стерилизовать в автоклаве
до 135°C. Она подходит для угловых
наконечников DUBLIN.

Номер позиции: DSLS9011

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Макс. количество оборотов

Передаточное соотношение

Тип

Совместимость

Тип охлаждения

Ротационный инструмент

Номер позиции

DUBLIN P 1:1

40.000 об/мин.

1:1

прямой наконечник без подсветки

ISO 3964

внутреннее

тип HP ø 2,35 мм

DSLS1031

Во всех наконечниках типа DUBLIN используется система внутреннего охлаждения. Охлаждающая вода и воздух подаются по двум независимым путям. Быструю замену ротационного инструмента обеспечивает практичный зажимной механизм. Поверхностная обработка гарантирует идеальную гигиену во время работы врача, а также и при очистке инструмента.

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА

DENSIM OIL



Смазочный аэрозоль

Для правильного функционирования и длительного срока службы инструментов необходимо регулярно применять смазочное средство DENSIM OIL, которое используется для всех турбин, прямых, угловых наконечников и головок. Аксессуары для ухода и смазочные адаптеры изделий DENSIM OIL являются составной частью фирменной упаковки изделия.



DENSIM DENTAL INSTRUMENTS



DENSIM
DENTAL INSTRUMENTS

CE
0434

