




Уникальная система VITA SYSTEM 3D-MASTER позволяет определить и с высокой точностью воспроизвести все цвета естественных зубов.

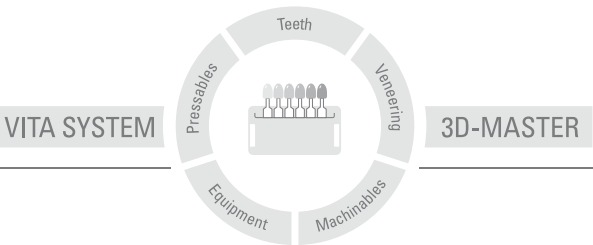

Внимание: Наши продукты следует использовать согласно инструкциям. Мы не несем ответственности за дефекты, обусловленные неправильным применением. Пользователь обязан перед использованием продукта удостовериться в целесообразности его применения. Наша ответственность исключается, если продукт был использован не по назначению или в недопустимом сочетании с материалами и приборами других производителей. В остальном наша ответственность за достоверность данных сведений является юридически независимой, и в каждом отдельном случае ограничивается стоимостью поставленного согласно счету товара без налогов. Прежде всего, мы не несем ответственности в допустимых законом пределах за неполученную прибыль, за опосредованный ущерб, за последствия или претензии третьих лиц по отношению к покупателю. Все претензии на возмещение ущерба (вина при заключении договора, при нарушении договора, неразрешенные действия и т.п.) принимаются только, если имели место умысел или грубая халатность. VITA Модульбокс не является неотъемлемой принадлежностью данного продукта. Дата выхода данной брошюры: 06.15

С изданием этой инструкции все предыдущие издания утрачивают силу. Актуальную версию см. www.vita-zahnfabrik.com

VITA V60 i-Line® имеет маркировку CE в соответствии с основными требованиями действующих директив 2006/95/EC, 2004/108/EC и 2011/65/EC.

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
facebook.com/vita.zahnfabrik



Дата выпуска 06.15

VITA shade, VITA made. **VITA**

VITA V60 i-Line® Истинная классика без компромиссов.



VITA хорошо известна своим высоким качеством и проверенными технологиями. Предлагая VITA V60 i-Line, фирма VITA продолжает последовательно двигаться в данном направлении. В концепции VITA V60 i-Line упор делается на два основных аспекта: надежные результаты обжига в течение длительного времени и удобство в работе.

При разработке новой печи для обжига важную роль играли функциональность и великолепное соотношение цены и качества. VITA V60 i-Line убеждает простым и удобным управлением: сенсорным экраном с интуитивным меню, а так же знаменитым долговечным кварцевым муфелем от VITA для достижения превосходных результатов обжига. Прочный металлический корпус и интегрированные столики для обжиговых изделий способны выдерживать высокие нагрузки.

В основе разработки VITA V60 i-Line лежит информация, полученная в ходе обратной связи от наших многочисленных клиентов по всему миру, а также многолетний опыт в области исследований и разработок VITA. В итоге получился надежный прибор, отвечающий всем требованиям, которые Вы предъявляете к печам для обжига керамики.

VITA V60 i-Line® - Ваши преимущества



Превосходные результаты обжига



Особенно удобные в эксплуатации базовые программы, программы сервиса и контрольные программы

- 1. Удобство в эксплуатации:** сенсорный экран и интуитивное меню заметно облегчают работу с VITA V60 i-Line. Минималистический дизайн и надежная технология ставят акцент на центральной функции: надежный обжиг.
- 2. Подключить & начать работать:** простой процесс введения в эксплуатацию – подключить, включить и начать обжиг!
- 3. Сделано в Германии:** высочайшее достижение современного инженерного искусства и оптимального качества.
- 4. VITA качество:** применение самых высококачественных материалов и продуманная конструкция только с одной целью: достижение бескомпромиссной надежности!
- 5. Легкость в обслуживании:** модульная структура, простой доступ к местам крепления облегчают сервисное обслуживание и уменьшают Ваши затраты в случае ремонта.
- 6. Высокопроизводительная печь для обжига керамики: настоящая "рабочая лошадка".** В высшей степени надежная, интегрированная защита от перепада напряжений и износостойкий кварцевый муфель VITA.
- 7. Концентрация на главном:** классический и проверенный концепт печи, который оосознанно отказывается от дорогостоящих дополнительных функций. Этот прибор концентрируется на своей основной функции, - надежном, высококачественном обжиге.



<https://stomshop.pro>

VITA V60 i-Line® - Технические характеристики и свойства

Технические характеристики

- подходит для всех видов обжига стоматологических изделий (включая кристаллизационный обжиг стеклокерамики на основе дисиликата лития и VITA SUPRINITY)
- сервисные и автоматические программы управления и контроля, как например, автоматическая калибровка температуры перед стартом программы обжига (VITA AutoAdjust), автоматический контроль температуры и вакуума, а также сохранение данных обжига
- Переход на аварийное электропитание в случае перепадов напряжения
- индивидуальная настройка выдержки вакуума
- контроль лифта
- индивидуальная настройка позиции лифта для предварительной сушки и предварительной охлаждения
- встроенная программа быстрого охлаждения
- VITA Energy Efficiency для TÜV сертифицированного рационального использования энергии

Технические характеристики	
Ширина	260 мм
Глубина	420 мм
Высота	570 мм
Вес	18 кг
Корпус	Листовая сталь с порошковым покрытием
Диаметр камеры обжига	90 мм
Высота камеры обжига	55 мм
Максимальная температура обжига	макс. 1200°C
Электропитание	230 В, 50 Гц или 100/110 В, 50/60Гц
Максимальная потребляемая мощность	макс. 1,5 кВт
Классификация	Класс надёжности 1

